




SILK'N, une innovation technologique au service de votre beauté et de votre bien-être pour réaliser vous même votre épilation longue durée à domicile.

Avec SILK'N, votre épilation est rapide

Chaque application ne dure que 45 secondes et traite une surface de 6 cm², soit environ 180 à 300 poils.

L'embout applicateur laisse des marques temporaires, ce qui vous évitera de traiter deux fois la même zone au cours de votre séance d'épilation.

Pour obtenir une épilation Longue durée, il faut compter 6 à 7 séances. Les 4 premières séances à 2 semaines d'intervalles. De la cinquième à la septième, un mois d'intervalle. Ensuite, utilisez SILK'N selon vos besoins A titre d'exemple, l'épilation d'une jambe entière nécessite 30 minutes, les 2 aisselles seulement 10 minutes

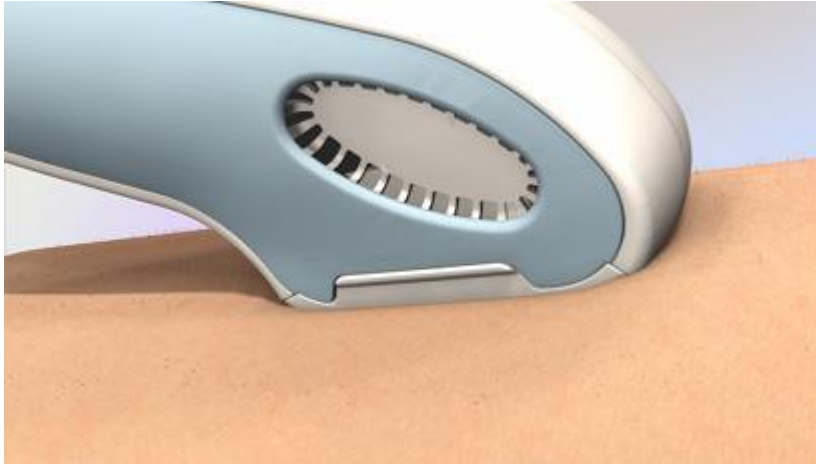

Une épilation longue durée est garantie aux personnes ayant la peau claire (peau de type I à IV selon la classification de FITZPATRICK) et poils bruns ou noirs.



Dans les essais cliniques et les tests de consommateurs , les utilisateurs de la technologie SILK'N l'ont jugé sûre et facile à mettre en oeuvre dans l'intimité de leur foyer.



SILK'N est facile à mettre en œuvre et l'auto-traitement est simple , rapide et propre.

L'utilisation de SILK'N vous permettra d'économiser de l'argent par rapport à l'utilisation prolongée de traitements laser professionnels, la cire ou le rasage.

Le ventilateur de refroidissement fait un bruit similaire à celui d'un sèche-cheveux.

Quand une impulsion de lumière HPL est activée, il est normal d'entendre un son pop subtil en même temps que le flash de lumière.

Une pression légère sur l'applicateur est nécessaire pour le déclenchement de la pulsation, ce qui rend difficile un déclenchement intempestif.

Lors de chaque impulsion, il est normal de ressentir une sensation de chaleur et de picotement. Ces sensations disparaissent très rapidement.

Pour le traitement initial, il faut toujours utiliser les réglages de faible énergie

•



SILK'N a été testé par des dermatologues et des chirurgiens plastiques qui ont conclu que cette technologie pouvait être utilisé en toute sécurité , facilement et efficacement à votre domicile.

SILK'N est aux normes CE pour l'Europe, FDA pour les USA, CSA et FCC pour le Canada.

Lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions , le traitement avec SILK'N est sans danger et avec un minimum de gêne.

SILK'N utilise également un très faible niveau d'énergie, mais suffisamment efficace, jusqu'à 5 joules par centimètre carré. Comparez cela à d'autres lasers à usage domestique qui, souvent, utilisent plus de 20 joules d'énergie.

La protection de vos yeux est assurée par un dispositif intégré dans l'applicateur: le port de lunettes de protection n'est donc pas nécessaire.

La pointe de l'applicateur a été conçue de sorte qu'une impulsion de lumière ne peut être émise si l'applicateur n'est pas en contact avec la peau.

La protection de votre peau est assurée par un interrupteur de sécurité.

Contrôle de la puissance à 5 niveaux.

Alarme sonore.

Remplacement de la lunette optique après 750 pulsations, soit 2 épilations complètes.